


家庭用紫外線治療器 スカーレットUV

形名 UV-221

取扱説明書

保証書付

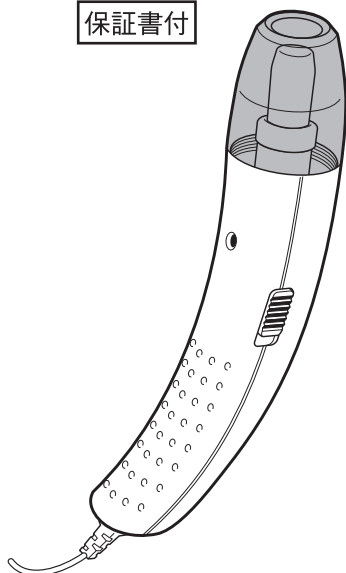

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称	3
正しくご使用いただくために	3・4
正しい使い方	4・5
ご使用後のお手入れと保管の仕方	6
知っておいて頂きたいこと	6
紫外線電球の取扱いについて	7
電球の交換のしかた	7
仕様	8
修理を依頼される前に	8
保証とアフターサービス・保証書	巻末

- この度は、「家庭用紫外線治療器スカーレットUV」をお買い上げ戴き、誠にありがとうございます。
- この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
- 保証書は販売店欄の記入を必ず確認のうえお受け取りください。
- 本品は一般家庭用です。業務用としてのご使用はなさないでください。
- 紫外線ランプ及び本品を廃棄する際は、地球環境を守るため不法放置はしないでください。また廃棄処分をされる場合は各自治体の指示に従い処分・廃棄をしてください。



みんなで止めよう温暖化
「HEATEC」チーム・マイナス6%



株式会社HEATEC

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味については、次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。



分解禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意事項は、○の中や近くに絵や文章を示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。



警告

修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

水につけないこと。また浴室やぬれた手で使用しないこと。

ショート・感電の原因になります。



分解禁止




水かけ禁止



注意

わきがまたは水虫の治療以外には使用しないこと。  禁止	交流100V以外では使用しないこと。 火災・感電の原因になります。  禁止
使用中や使用直後は、ランプ及びその周辺にふれないこと。 やけどをすることがあります。  接触禁止	電源コードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと。 感電やショートして発火することがあります。  プラグを持って抜け
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。  プラグを抜く	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。 また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないこと。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。  禁止
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。 感電やショート・発火の原因になります。  禁止	しばらく使用しても症状の改善がみられない場合には使用を中止し、医師に相談してください。  使用中止

各部の名称

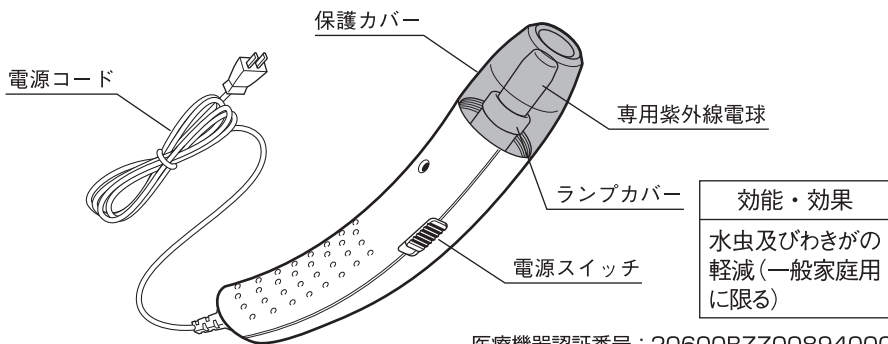

医療機器認証番号：20600BZZ00894000

正しくご使用いただくために



警告

次の人は使用しない又はさせないこと

- 今までに日光及び他の光線によって、発赤、かゆみなどをおこしたことがある人
また、太陽にさらされたときに日焼けでなくやけどしたり、ひどい日焼けによるやけどのある人
- 新生児、乳幼児やご自分で意思表示ができない人
- 皮膚がんにかかっている人、又は以前かかっていた人及びかかりやすい人
- 日光浴など日焼けを行った後
- 紫外線に対する過敏性を高める医薬品を摂取しているとき



次の人は使用前に医師に相談すること

- 悪性の腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 知覚障害のある人
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 安静を必要とする人
- 体温が38℃以上（有熱期）の人（急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱しているときなど）
- 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疼痛性疾患の人
- 肺結核、心疾患、腎臓疾患患者、急性皮膚炎、甲状腺機能亢進症、膠原病（全身性エリテマトーデスなど）、ポリフィリン症、放射線治療を受けている患者など紫外線により過敏・過剰反応の影響が考えられる人
- 皮膚に感染症又は創傷のある人
- 化粧品、消毒剤などでかぶれたことのある人
- 光線過敏症の人
- その他医師の治療を受けている人及び医薬品を服用している人（※規定外、当社が独自に設定）



医師に相談

※その他ご不明な場合は、医師に相談してください。

使用される前に行ってください

- 入浴するなどして、治療したいところを清潔にしてからご使用ください。
- わきがの治療をするときは、あらかじめ、わきの下の毛を剃ってください。
毛が照射の妨げとなり、治療効果が十分発揮できないことがあります。
- 初めて使用されるときは、「正しい使い方」に沿った方法で1分間だけ照射して、肌が赤くなる又はかゆくなる等身体に何らかの異常があらわれないことを確認してください。身体に異常があらわれないかどうかは、照射直後だけでなく、照射後2日間様子を見て判断するようにしてください。また、何らかの異常が生じた場合は、直ちに医師に相談をしてください。

正しい使い方

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2 治療したいところを露出します。
- 3 付属の保護メガネをかけます。



光線直視禁止




警告

光線を直視しないこと。直視したり見つめたりすると目を痛めることがあります。
必ず付属の保護メガネをかけてご使用ください。

- 4 電源スイッチを「入」にします。紫外線電球が青白く点灯することを確認してください。
- 5 治療したいところに紫外線を照射します。
照射時間及び照射する距離は、症状や治療部位により異なります。
照射部位1箇所に対して1日2回まで、下記を目安にご使用ください。
※但し同一箇所に継続して照射される場合は1分以上の時間をあけてください。

電源スイッチ

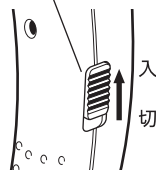

《照射時間、距離の目安》

わきがの治療		患部から約5cmの距離で約1分照射
水虫の治療		
水泡ができていますタイプ	指のまた	患部から約5cmの距離で約3分照射
	足の裏	患部から約10cmの距離で約1分照射
角質層が厚くなり白く見えるタイプ		患部から約5cmの距離で約5分照射

6 ご使用を中止される場合は、電源スイッチを「切」にします。

- 消し忘れ防止タイマーが内蔵されておりますので、電源スイッチを「入」にしてから約5分で自動消灯します。
 - 初めてご使用になる場合、又はしばらくお使いにならなかった際などには、消し忘れ防止タイマーが正しく動作することをご確認ください。
 - 消し忘れ防止タイマーで自動消灯した後、継続して使用する場合は、必ず一度電源スイッチを「切」にして1分以上経過後、電源スイッチを「入」にしてください。
- ※1分以上経過しないと、消し忘れ防止タイマーが正しく動作しません。

7 電源プラグをコンセントから抜きます。

使用例



警告

- 適当な治療時間、距離、照射頻度は症状や人により異なりますが、「正しい使い方」を無視して長い時間照射したりすることは絶対に避けてください。
- 使用中、肌が赤くなる等身体に何らかの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し医師に相談してください。
- 電源コードが破損した場合、消し忘れ防止タイマーが正常に作動しない場合、本体が破損した場合など、機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、お買い上げの販売店又は「ヒートテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。
- 落雷時や停電時などは直ちにスイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用後のお手入れと保管の仕方

- ご使用後は電源スイッチが「切」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体表面及び保護メガネはやわらかい布、又は化学雑巾で乾拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は、うすい中性洗剤を布に付けて拭いてください。ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などは製品を傷めることがありますので、おやめください。
- 電球の熱が十分に下がったことを確認して、湿気の少ないところにほりがかからないように保管をしてください。
- しばらくお使いにならなかった際は、「正しい使い方」に沿って本商品が正しく動作しているかをご確認してからお使いください。

知っておいて頂きたいこと

- 本商品は管理医療機器です。ご使用に際しては医師の指導の下正しくお使いください。
- しばらく使用しても症状の改善がみられない場合や、ご使用によって、発赤、腫脹、頑固なはれもの、炎症、色素及びあざなどが現れた場合、その他身体に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して医師に相談をしてください。
- ご使用に際しては必ず同梱されている専用の保護メガネをご使用ください。紫外線を直視すると表面炎症を生じることがあります。（特に、白内障手術の後などでは、網膜にダメージを与えることもありますのでご注意ください）
- 「正しい使い方」をよく読み、照射時間を守ってお使いください。
長い時間照射したりすると、日焼けをおこしたり、過敏な方の場合には皮膚又は眼にダメージを招くおそれがあります。また長い時間繰り返し照射をすると、皮膚腫瘍の進行の危険を増すだけでなく、皮膚の早い老化を招くこともありますので、ご注意ください。
- 他の治療器との併用はしないでください。
- ご使用前には化粧品を十分に落とし、サンスクリーンなどを塗らないでください。

紫外線電球の取扱いについて

電球に手を触れない 使用中や使用直後は、電球に手などを触れないでください。 やけどをすることがあります。	電球の交換は電源プラグを抜いてから 電球の交換は、電源プラグがコンセントから抜けていること、及び電球の熱が十分さがっていることを確認してから行って下さい。 感電ややけどの原因になります。
電球の取扱いはていねいに 電球に強い衝撃を与えたり、キズつけたりしないよう注意してください。 破損によりけがをしたり、故障の原因となります。	本器専用の電球以外は使用しない 本機貼付のラベルに表記された本機専用の電球（CB-306）以外の電球を取り付けることは絶対にしないでください。 治療効果が得られないだけでなく、器具が加熱して発火することがあります。
電球に紙などを貼らない 電球に紙などを貼り付けたり、塗料を付着させたりしないでください。 治療効果が損なわれるだけでなく、電球が加熱して破損の原因となります。	燃えやすいものを近づけない 電球に燃えやすいものを近づけたりしないでください。 過熱して発火することがあります。

交換用電球の購入について


スカーレットUV専用の紫外線電球のお買い求めは、販売店もしくは「ヒーテックお客様サービス窓口」までご連絡下さい。

●UV-221ランプ 形名：CB-306 標準価格：3,150円（税込）

電球の交換のしかた

電球を交換する場合は、必ず、本器専用の電球を使用してください。

- 1 電源プラグがコンセントから抜けていること、及び電球の熱が十分にさがっていることを確認します。
- 2 保護カバーを左に回して取り外します。
- 3 古い電球を取り外します。
（ランプカバーは取り外さないでください）
- 4 新しい電球を取り付けます。
- 5 保護カバーを元どおり取り付けます。
- 6 電球が点灯することを確認します。
● ランプの耐久時間は約2000時間ですが、使用状況により異なる場合があります。

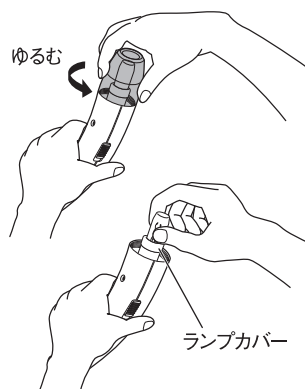

紫外線を効率よく放射させる為、紫外線電球の中に玉状のものが入っていますので、本体を振ると、カラカラと音がしますが、これは、紫外線電球の特性上のもので、異常ではございません。

仕 様

形 名	UV-221
定 格	AC100V 50/60Hz 3.0/3.6W
外 形 寸 法	φ40 × 177L (mm)
商 品 質 量	約230 g
外 装	本体：ABS樹脂
	保護カバー：耐熱アクリル樹脂 (UVカット)
電 源 コ ー ド	プラグ付電源コード 最長2.5m
付 属 品	保護メガネ (2個), ハードケース
タ イ マ ー 定 格	消し忘れ防止タイマー : 5分±10%

修理を依頼される前に

●修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症 状	調 べ る と こ ろ	な お し か た
電球が点灯しない	●コンセントが抜けていませんか。	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●電源スイッチが「切」になっていませんか。	●電源スイッチを「入」にしてください。
	●電球がゆるんでいませんか。	●電球をしっかりと取付けてください。
	●電球が切れていませんか。	●専用の紫外線電球をお買い求めのうえ、交換してください。

●以上のことをお調べになってそれでも直らない場合は、お買い上げの販売店または「ヒーテックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

保証とアフターサービス

●保証書

この商品には「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みになって大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき

8ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

○保証期間中のとき：お買上げ販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき：修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

●アフターサービスについて

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ

「ヒートックお客様サービス窓口」

☎ 0467-42-8336 (直通)

☎ 03-3767-8000 (転送)

平日午前9時～午後5時45分

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船5-12-18

FAX. 0467-37-7721

保証書 [持込修理]

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。

※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買上げいただいた販売店にお申し出ください。

形 名	UV-221	※お買上げ日	保証期間
		年 月 日	お買上げ日より 本体 1年
お 客 様	ご 住 所	〒	
	フリガナ		
	お 名 前		
	電 話		
※ 販 売 店			

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

—【無料修理規定】—

- 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に、修理をご依頼できない場合は、株式会社HEATECへお問い合わせください。
- 保証期間内であつても、次のような場合は有料となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障及び損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関する実費を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 修理ご依頼品のご持参および持ち帰りの場合の交通費、またご郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様の負担となります。

修理メモ



株式会社HEATEC

〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13 TEL.03(3768)6111

3K21.4-AM1003G